



EUROIMMUN IF-PS Das Immunfluoreszenz-Positionierungssystem

Automatische Synchronisierung mit dem Objektträger-Layout in EUROLabOffice


Vorteile für den Kunden

Höchste Sicherheit

- Fehleingaben aufgrund falscher Positionen sind ausgeschlossen
- QM-unterstützte Risikominimierung


Effizienz und maximaler Komfort

- Die Eingabe der Ergebnisse erfolgt papierlos „am Mikroskop“ – Vorbefunde können parallel eingesehen werden

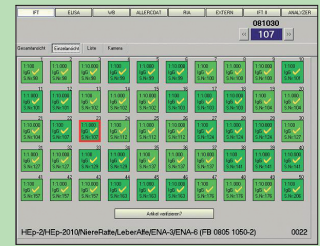

Die Objektivposition wird jederzeit automatisch erkannt und die entsprechende Ansicht im Ergebnisformular des jeweiligen Patienten angezeigt.

Der IFT-Arbeitsplatz

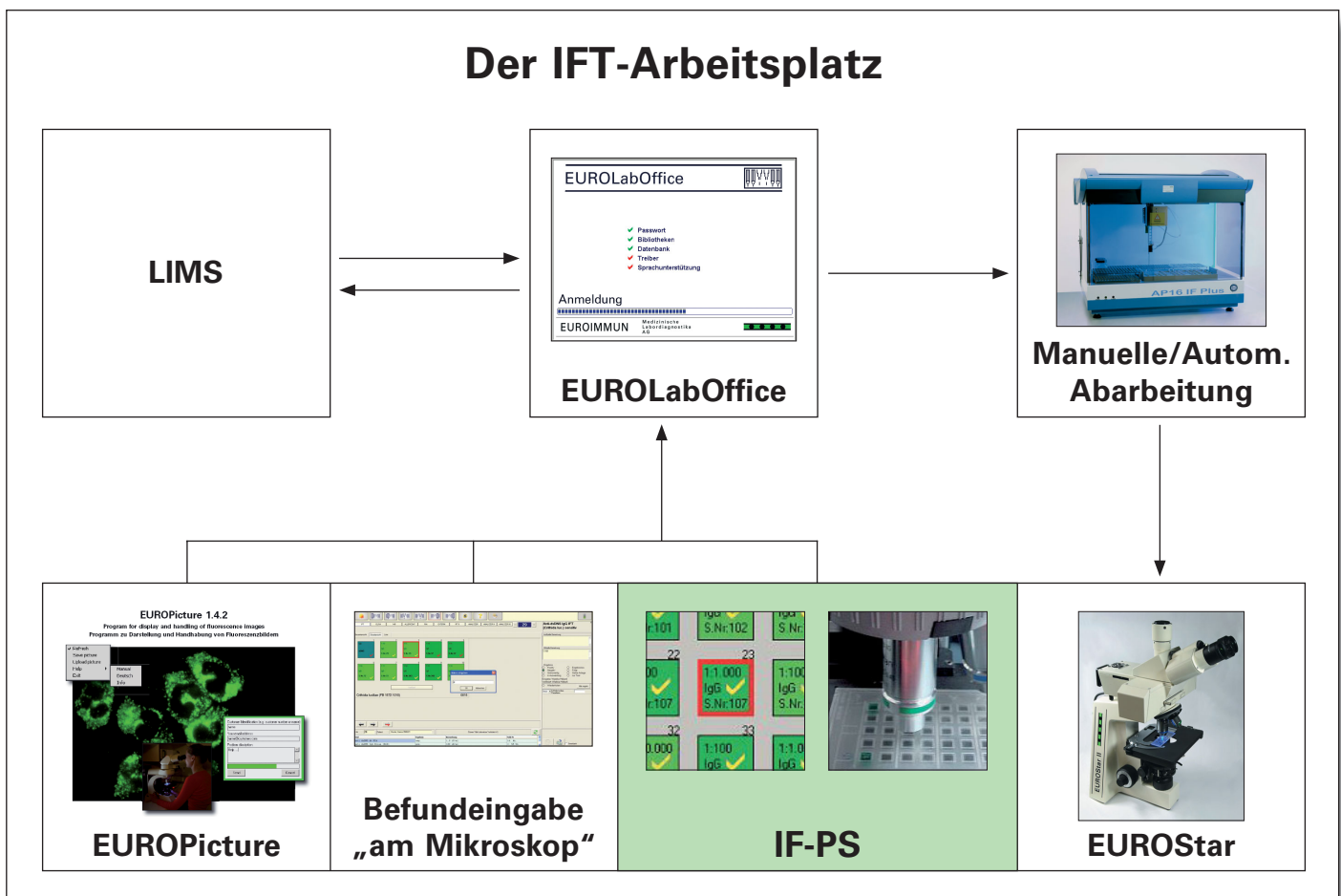

Systemvoraussetzungen: EUROLabOffice mit gültigem Wartungsvertrag, EUROStar I oder II oder Zeiss Axioscope 2 plus, PC-System (>2GHz, 1GB RAM, Windows 2000, XP) mit freier RS232-Schnittstelle und Netzwerkanbindung in Mikroskoptähe, Fremdartikel werden nicht unterstützt.